

センサーをパソコンとつなぐだけ 929 Dental Sensor



929デンタルセンサー (S)

小児フィルムサイズと同等 36.7mm×24.3mm




929デンタルセンサー (L)

フィルムサイズと同等 42.8mm×30.5mm



画像表示までわずか3秒

パソコンと直結だから圧倒的な早さで画像を表示。イメージングプレート (IP) とは異なり、読み取りスキャナーは不要。業界最高水準のセンサーにより、シャープなX線画像を取得します。

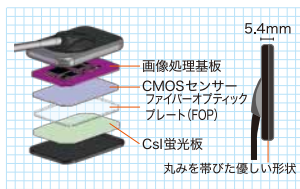

防水型IP67 (IEC規格) 準拠



防水構造



耐塵ケース/
耐久ケーブル

ポジショニング時の ストレスを 大幅に軽減



929デンタルセンサー専用開発されたポジショニングバイトは、センサーの性能を最大限に活かし、かつ患者さんに優しく正確に撮影できます。

仕様

■撮影方式:CsIシンチレーター (FOP搭載) ■センサー構造:CMOS ■有効読取面積:(L) 36×26 [mm] / (S) 30×20 [mm] ■ピクセルサイズ:19×19 [μm] ■総画素数:(L) 1898×1368 [pixel] / (S) 1580×1050 [pixel] ■階調:12 [bit] ■保存形式: DICOM / BMP / JPEG / PNG / GIF ■インターフェース: USB2.0 ■使用電源:DC5V 80mA (L) / 60mA (S) (USBポートより供給) ■センサー外形寸法 (幅×奥行×高さ): (L) 42.8×30.5×11.5 [mm] / (S) 36.7×24.3×11.5 [mm] ■質量:(L) 70 [g] / (S) 65 [g] ■対応OS:Windows® / 7 / 8 / 8.1 (AppleMacOS®には対応していません) ■付属ソフトの機能:撮影・保存・表示・印刷 / 強調処理 (シャープネス) / 拡大・縮小機能 / 輝度・コントラスト調整 / ガンマ調整 / ネガポジ反転 / 左右・上下反転 / 回転表示 / 測定・注釈機能 / 分割表示 ※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります。



TEL ☎ 0120-911-006

電話受付時間 月～土曜日 8:30～19:00/日曜・祝日 11:00～19:00

株式会社 RF929 (クリニック)

会社概要: 資本金5,000万円 (アールエフの100%子会社)

事業内容: クリニック経営に纏わるコンサルタント業務及び製品の企画販売、書籍・雑誌の出版、映像コンテンツ作成、付帯する一切の事業、ショッピングセンタービルの経営・運営

Jd_161012_F_TL_929dental