

動画撮影で伝える、伝わる。



- SDカード対応
- 5chレシーバー内蔵
- 5.7インチTFTモニター
- 静止画記録
- 動画記録/再生
- 上下左右反転
- 明るさ色合い調整
- WIRELESS Evolution

動画でまとめて一括説明が可能に。



ポールに簡単取付!! (クリップアーム付)



POINT!

ワンタッチ録画で数カ所の治療説明もよりスムーズに

数カ所の治療を一括で説明が可能。
さらに気になる部分は停止して、より詳しい説明もできます。
また、動画再生のため、何度も撮影する手間が省けます。



Play ▶


Stop II

Play ▶

POINT!

ボタン1つで画像の上下・左右反転が自由自在

画像を上下・左右反転することで、
口腔内カメラで撮影した
画像を患者さんにも、
わかりやすい向きで表示できます。

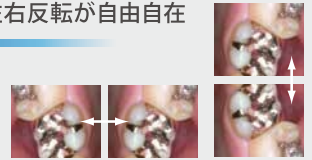

左右反転

上下反転

仕様

■液晶モニター:5.7インチTFTカラーモニター (960X240pixel) ■電源:ACアダプター 6.3V/2A ■記録メディア:SDメモリーカード (2GBまで) ■静止画記録:JPEGフォーマット (640×480pixel) ■動画記録:Motion JPEGフォーマット (AVI拡張子ファイル) 640×480pixel 15~30fps ■インターフェース:ビデオ入出力端子 (1Vp-p (同期負) 75Ω不平衡) ■再生機能:保存ファイル一覧表示 (9分割) / 静止画フル画像表示 / 動画ファイル再生、一時停止 ■メニュー操作:映像調整機能 / (明るさ、色合い、コントラスト、シャープネス) 時刻合わせ機能 / チャンネル切り替え ■消費電力:7.8W ■付属品/クリップアーム (取付金具) ■外形寸法: 175 (W) × 155 (D) × 120 (H) mm ■本体重量:650g

*デザイン・仕様は予告無く変更になる場合がございます。予めご了承ください。

ドクターズ・ステーションがコンパクトに!

動画再生を可能にした次世代動画/メモリー液晶モニター、「Dōga」。

あのドクターズ・ステーションの機能を搭載し、

さらにコンパクトに使いやすく、お求めやすくなりました。

店舗・事業所・研究所 旭川 | 札幌 | 盛岡 | 石巻 | 仙台 | 福島 | 大宮 | 東京 | 横浜 | 長野中央 | 長野東部 | 長野駅前Cone | 須坂
大型商業ビル・研修施設 斑尾 | 松本 | 諏訪 | 新潟 | 金沢 | 名古屋 | 大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 松山 | 福岡 | 鹿児島 | ミシガン | NY
アールエフ 本社 長野市中御所岡田町3 TEL ☎0120-911-006 FAX ☎0120-989-089
(電話受付時間) 月~土曜 8:30~19:00 ※フリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へお掛けください。
日曜・祝日 11:00~19:00 TEL:026-225-7711 FAX:026-225-7717

事業内容 ■産業分野:工業用内視鏡・X線CT・デジタルX線非破壊撮影装置等 ■医科分野:X線CT・デジタルレントゲンNAOMI・各種医科カメラ等
■カプセル内視鏡・使い捨て内視鏡等 ■歯科分野:X線CT・パノラマ/セファレントゲン・口腔内カメラ等 ■置き業事業(株式会社RF929)

世界初バッテリーレスのカプセル内視鏡

Sayaka



世界最小 ※当社調べ

原寸大

アールエフ