



ホルダー対応エリアの歯牙を確実に撮影



アルエフ製 ポジショニングバイト

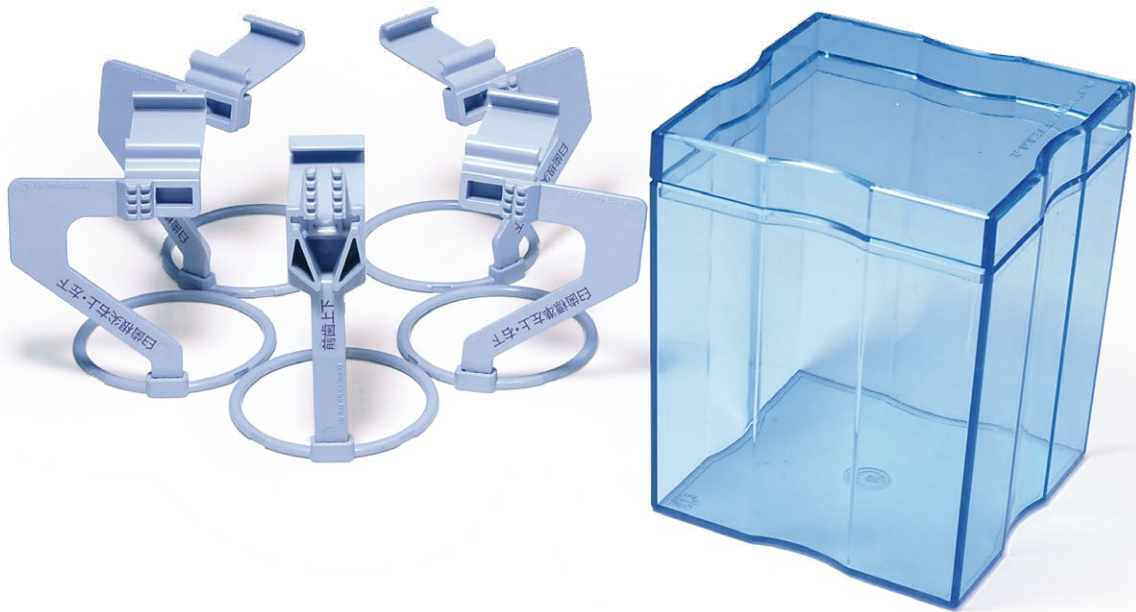

パッケージ内容

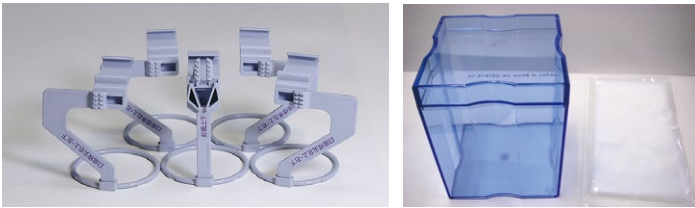

[インジケーター 計5個] 白歯標準(右上・左下用、左上・右下用)各1 / 白歯根尖(右上・左下用、左上・右下用)各1 / 前歯上下
[付属品] 消毒槽 / 防水衛生用ディスコカバー (100枚)

※NAOMI デンタル(L)(S)はサイズが異なります。

対応製品一覧



痛みなく、上下歯牙で正確に噛み合わせるにより、ホルダー対応エリアの歯牙が確実に撮影できます。

取り付けカンタン！

【前歯部の場合】ホルダー上部にセンサーを引っ掛け、ケーブルに負荷が掛からない様に奥まで挿入します。




【臼歯部の場合】ホルダー横側よりスライドさせ、挿入します。



撮影ラクラク！

上下歯牙が咬合ブロックを正確に咬合すれば確実にホルダーに対応したエリアを失敗することなく撮影することができます。

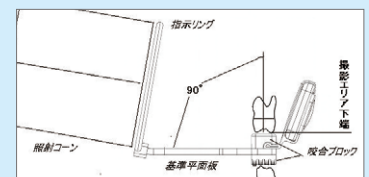

www.rfsystemlab.com

アルエフ 長野東部事業所 〒381-0024 長野市南長池299-16 TEL:026-225-7711 FAX:026-225-7717

Jd_190809_R_T1_bite_c1g