

簡単操作・コンパクト設計 設置も簡単

PORTA 100HF



〈設置イメージ〉 臥位撮影も対応可 ご相談ください



ポータブルX線撮影装置 PORTA 100HF

携帯性に優れたポータブルX線撮影装置

電源100VタイプのポータブルX線撮影装置。工業用製品に多い200V電源を必要としないため、常設でも現場でも簡単に設置可能です。



※製品の色等は若干異なる場合がございます。

見やすいコントロールパネル


照射条件のkV・mAs表示は180°回転表示可能。高輝度LEDを採用し屋外の現場でも確実な数字確認、読み取りをサポートします。

安定した出力


長時間の使用に耐える小型X線管をセレクトし、安定した電源供給回路と組み合わせることで高画質なX線撮影を可能にしました。

撮影条件を簡単メモリ

目的・対象により8パターンの撮影条件を記憶。条件呼び出しボタンを押すだけで、条件呼び出しができます。

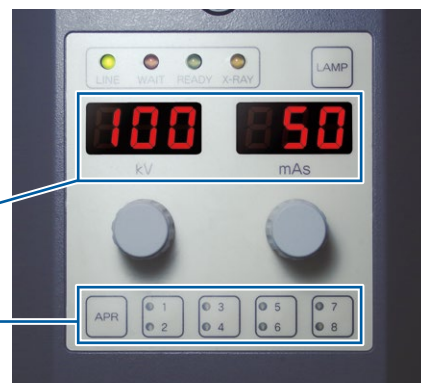

寸法図

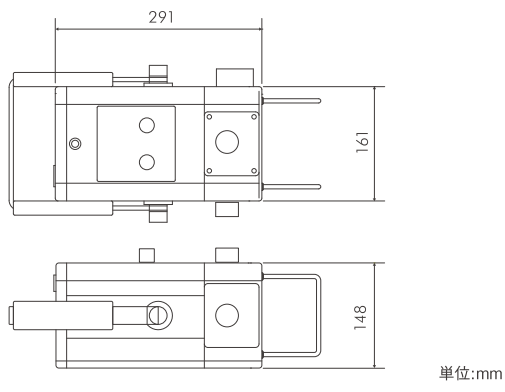

主要装備・仕様

出力	装置定格	40 - 66 kV 30mA 68 - 100 kV 20mA
	管電圧範囲	40 kV - 100 kV (2kVステップ)
	最大管電流	30mA
	mAs	0.3mAs - 50 mAs (32ステップ)
X線管	焦点寸法	1.2 x 1.2 mm
	ターゲット角度	16°
	陽極熱容量	14 kJ
	固有透過	アルミニウム当量最小 0.8mm
コリメータ	ランプ定格	12V/50W 照射野投光式
	ランプタイマー	30秒
電源	定格電圧	100V
	周波数	50 / 60 Hz
	電源容量	最大 3kVA
総重量		8.8kg
付属品		ハンドスイッチ / 電源ケーブル / キャリングケース



◀お問合せはこちら

アールエフ TEL 0120-911-006 (月~土) 10:00~19:00 / (日・祝) 11:00~19:00

Jm_260608_R_MT_100HF